

Набор EasyCare арт. D400 100 017

СОСТОИТ ИЗ:

HD гистероскоп, 2,9 мм, 30°
Автоклавируемый. Длина: 300 мм
арт. D300 100 000



Внешний градуиров. операционный тубус, 5,5 мм
Вращ. краник. Quick lock. Длина: 216 мм
арт. D300 110 000



Внутр. градуиров. операционный тубус, 4,9 мм
Операц. канал 7Fr. Вращ. краник. Длина: 230 мм
арт. D300 110 001



Градуиров. диагностический тубус, 4 мм
Вращ. краник. Длина: 270 мм
арт. D300 110 002



Градуиров. ножницы, 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Одна подвижная бранша
арт. D300 120 008

NEW



Градуиров. биопсийные щипцы, 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Две подвижные бранши
арт. D300 120 010

NEW



FLUSHING PORT



Градуиров. щипцы (аллигатор), 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Две подвижные бранши
арт. D300 120 009

NEW



Градуиров. захватывающие щипцы IUD, 7Fr.
Полу-жесткие. С портом для промывки
Длина: 340 мм. Две подвижные бранши
арт. D300 120 011

NEW



Световод
Автоклавир. Ø:3,5 мм. Длина: 2,3 м. с коннекторами Storz
арт. D200 150 500



Дополнительные принадлежности:

Биполярный электрод, гибкий, тип-кнопка, 5Fr.
арт. D300 140 010



Биполярный электрод, гибкий, тип-игла, 5Fr.
арт. D300 140 011



Стерилизационная корзина
Автоклавир. 480x250x47 мм. С крышкой и силиконовой подложкой
арт. D200 160 500



Zone Athélie V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tel : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com



imaging all the women



EasyCare

Комплексное решение
See&Treat для безопасной
гистероскопии
Проф. H. Fernandez






Проф. H. Fernandez,
Руководитель отделения OB/GYN
Kremlin Bicêtre Hospital. Франция

«Множество процедур может быть выполнено в кабинете во время диагностической гистероскопии, не требуя госпитализации ваших пациентов и нахождения их под наркозом. Это одно из многочисленных преимуществ концепции See&Treat, а также забота о пациенте, сокращение загрузки операционной и освобождение ее для более тяжелых операций.


Для See&Treat необходимо иметь комплексное и эффективное оборудование. EasyCare предлагает правильное решение с удобными тубусами, но главное это набор инструментов 7Fr., которые намного эффективнее традиционных 5Fr. Ваши движения точны, результат незамедлителен, ваш пациент удовлетворен. Кроме того, каждый инструмент градуирован для облегчения манипуляций.»

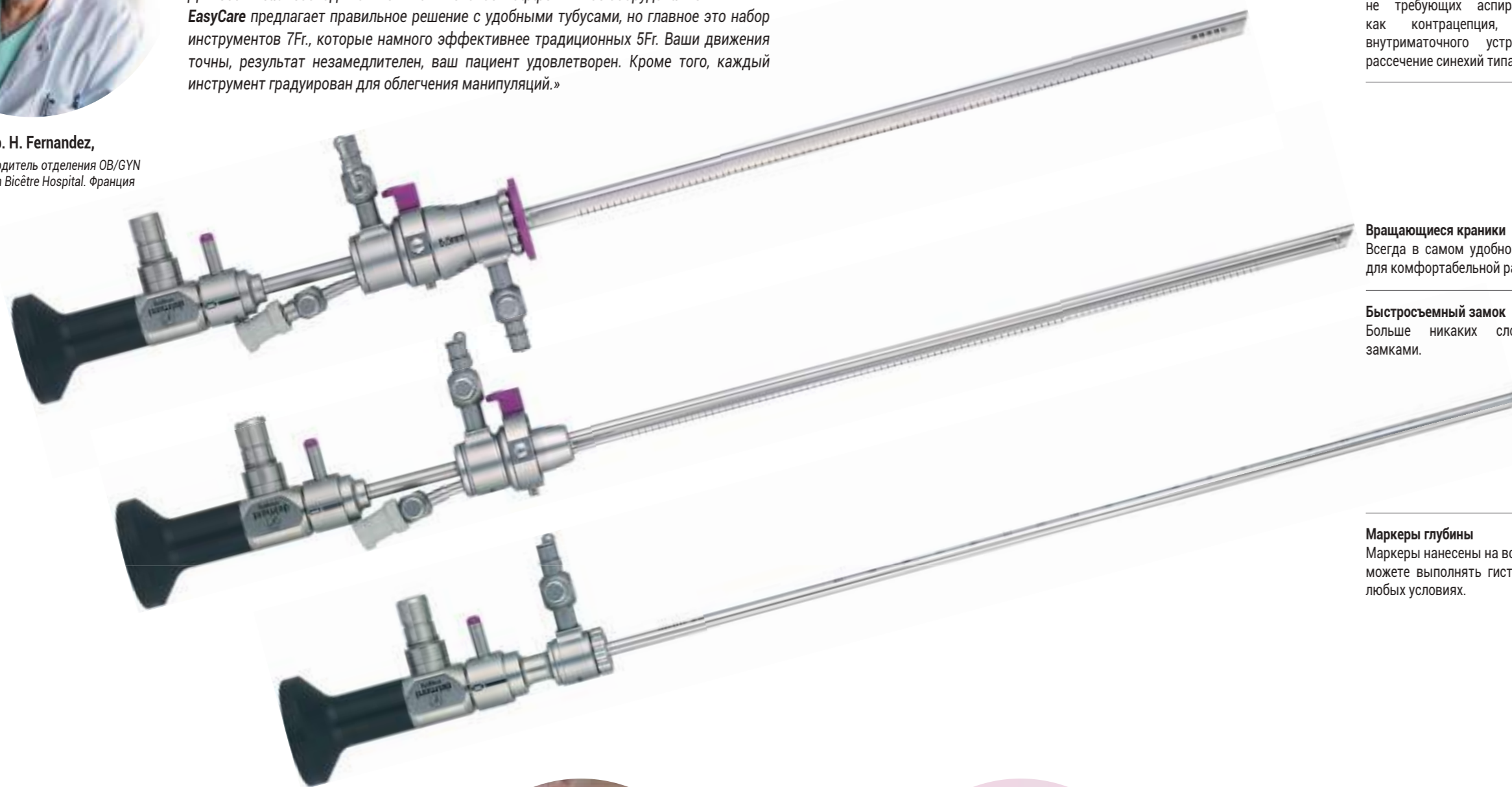

Внутренний атравмат. тубус 4,9 мм
Тупой наконечник и еще меньший диаметр, внутренний тубус был разработан для использования без внешнего тубуса. Это идеальный инструмент для манипуляций, не требующих аспирации, таких как контрацепция, извлечение внутриматочного устройства или рассечение синехий типа 1 или 2.




Вращающиеся краники
Всегда в самом удобном положении для комфортабельной работы!

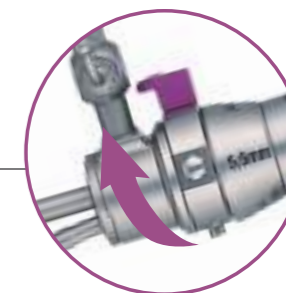



Быстросъемный замок
Больше никаких сложностей с замками.

Маркеры глубины
Маркеры нанесены на все тубусы. Вы можете выполнять гистероскопию в любых условиях.

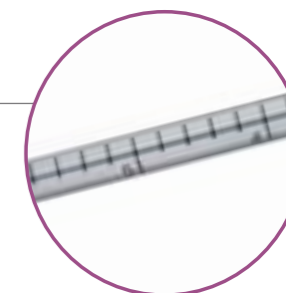

HD гистероскоп: непревзойденная производительность и выдающаяся долговечность

Наше последнее поколение линз, разработанных для получения всех преимуществ HD, обеспечивает детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Сверхразрешение вместе с однородным распределением света обеспечивает огромную глубину резкости. Изображение полностью будет четким! Наш HD гистероскоп автоклавируемый. Конструкция из трех отдельных трубок делает его прочным, долговечным, но, в то же время, легко ремонтируемым в случае поломки.

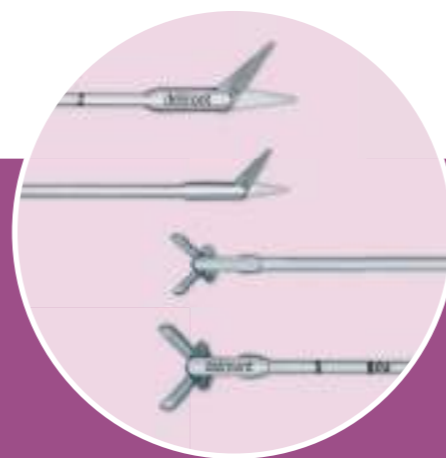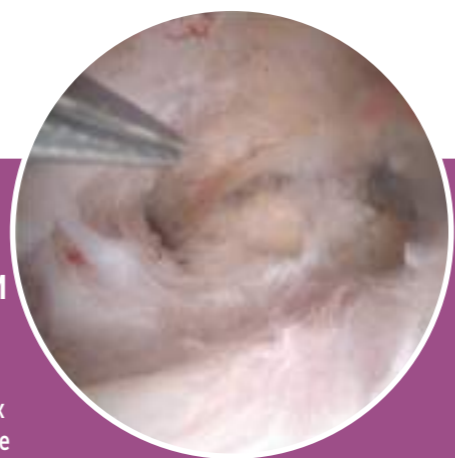

Эффективность 7Fr.¹ !

Лезвия ножниц 7Fr. на 50% длиннее² чем лезвия ножниц 5Fr., объем материала изъятый с помощью биопсийных щипцов 7Fr. в 3 раза больше³ чем у щипцов 5Fr. !

Инструменты 7Fr. в действительности более жесткие и более точные чем 5Fr.

Вы экономите время и повышаете комфорт пациента.

¹: 1 мм = 3Fr.
²: 5,7 мм против 3,8 мм
³: 8,23 мм³ против 3,2 мм³